




LC80 Steelco kabinettdiskdesinfektor

Kabinettdiskdesinfektor LC80 är det självklara valet för exempelvis sterilcentraler, hjälpmedelscentraler, tvättcentraler eller bårhus.

En helautomatisk diskdesinfektor med motoriserad skjutdörr. Finns tillgänglig med en eller två dörrar.



LC 80 BOT version, har en dörröppning som är 1200 mm bred. Perfekt för tvätt av sängar.

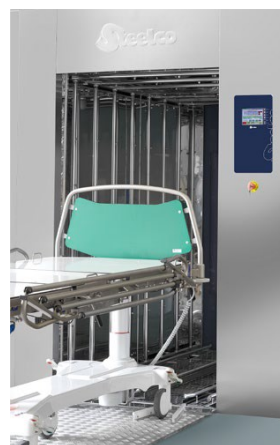

AD MediCals kemisortiment, diskmedel och torkmedel. Klick här för att gå till kemi.



Rostfri dörr (tillval)




Lyftplattformar (tillval)



Klick här för att gå

OFFERTFÖRFRÅGAN

Stort sortiment av vagnar. Här är några exempel

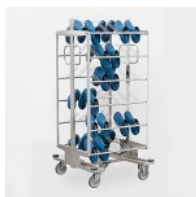

C658




C690



C653


Oscillerande rör med munstycken i rostfritt stål

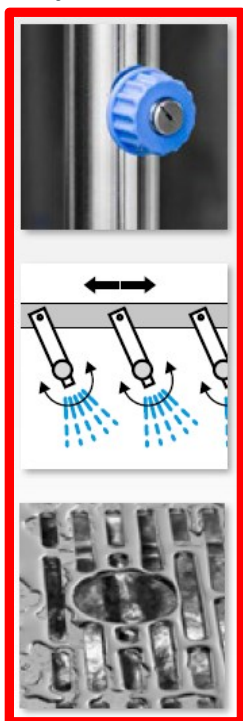



Självrengöringsfilter som spolar och fångar upp rester under tvättning.



Dockningsanslutning

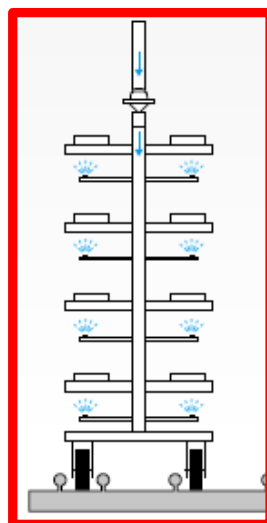

Tiltningsfunktion i sidled gör att torkningsfasen blir snabbare, då vattendroppar rinner av.

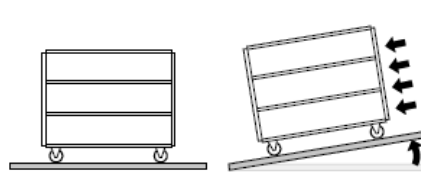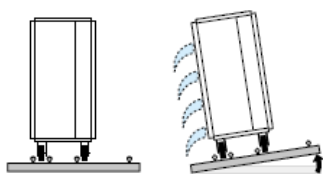

Tiltningsfunktion längsgående i slutet av cykeln, underlättar lossningen av vagnar.

Kabinett i gropen (150mm)



Kabinett utan gropen (med ramp)





LC80 – LC80 BOT Nyckelfunktioner

- ➔ Hög säkerhet och lättanvänd touch-kontrollsystem på panelen med färgskärm för att visualisera cykelstatus.
- ➔ 10 standardprogram och 40 extra program tillgängliga för anpassning.
- ➔ Motoriserad skjuddörr, glasdörr av dubbel HST härdat glas eller rostfritt.
- ➔ Dubbla torkningssystem med justerbar tid och temperaturinställning. Hjälper till att säkerställa fullständig torkning.
- ➔ Diskning- och desinfektions-temperaturen är helt justerbar upp till 93° C. Temperaturen övervakas av två oberoende temperaturgivare.
- ➔ Stark rostfritt cirkulationspump, vertikalt installerad, säkerställer högt vattenflöde kombinerat med effektivt spraytryck.
- ➔ Kammaren, diskarmar och vattenfilter av högkvalitativt AISI 316L rostfritt stål. Ytterpaneler och chassi tillverkat av AISI 304 rostfritt stål.
- ➔ Självrengöringsfilter för återcirkulation av tvättvattnet.
- ➔ Två kemidoseringspumpar försedda med flödesmätare och nivåbevakning.
- ➔ Tryckvakt för övervakning av diskprocess.
- ➔ En eller två dörrar version.


Tillval

- ➔ 2 extra kemiska doseringspumpar
- ➔ HEPA H14 luftfilter
- ➔ Konduktivitetssensor
- ➔ Integrerad skrivare
- ➔ Ethernet-anslutning (T-DOC kompatibel)
- ➔ Analog sensor på disk krets för tryckkontroll
- ➔ Ljus inuti kammaren
- ➔ Avloppspump
- ➔ Flödesmätare för kemisk dosering
- ➔ Ångkondensator
- ➔ Tredje vattentank
- ➔ Dockningsanslutning
- ➔ Automatik inlastning / utlastning
- ➔ Vattenåtervinningssystem
- ➔ Avloppkylning
- ➔ Streckkodsläsare

Mått (Rätten till ändringar förbehålles)

LC80	Yttre dimensioner			Kammare dimensioner		
KAMMARE	BRED	DJUP	HÖJD	BRED	DJUP	HÖJD
2,25m	2500	2550	2260	1000	2250	1890
3,00m	2500	3300	2260	1000	3000	1890

LC80 BOT	Yttre dimensioner			Kammare dimensioner		
KAMMARE	BRED	DJUP	HÖJD	BRED	DJUP	HÖJD
2,25m	2900	2550	2260	1200	2250	1890
3,00m	2900	3300	2260	1200	3000	1890

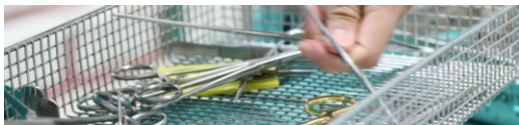

Vagnar



C653
Vagn för sterila container.
Upp till 18 sterila container
med lock.
Mått mm (B X D X H)
840 x 1400 x 1710



C690
Upp till 21 sterila container
med lock.
4 nivåer med 8 diskarmar.
Mått mm (B X D X H)
920 x 1440 x 1765



C654
Vagn för sterila container.
Upp till 10 sterila container
med lock.
Mått mm (B X D X H)
840 x 840 x 1655



C983
Upp till 28 DIN korgar.
4 nivåer med 16 diskarmar.
Mått mm (B X D X H)
920 x 1440 x 1770



C655
Vagn för container.
Upp till 12 sterila container
med lock.
Mått mm (B X D X H)
840 x 1400 x 1700




C658
Upp till 30 par av skor.
Mått mm (B X D X H)
840 x 700 x 1655



C1077
Vagn för container.
Mått mm (B X D X H)
920 x 1440 x 1770

Om ni inte finner en vagn som passar för dina instrument eller last, kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta en lösning.

Tillbehör

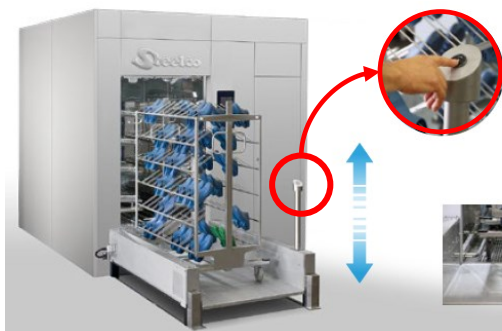

Lyftplattformar

För en kabinett som har en reducerad grop alt. utan grop.



AD MediCals kemisortiment, diskmedel och torkmedel. Klicka här för att gå till kemi.





Kabinett installation

Mer än 20 kabinettdiskdesinfektorer aktiva i hela Sverige.
De är installerade på hjälpmedelscentraler, sjukhus, bårhus, tvättcentraler, mm.



Hjälpmedelscentral

LC80 kabinett kan användas för tvätt av rullstolar, rollatorer, duschstolar, toalettstolar, hjälpmedelstillbehör.



Sterilcentral

LC80 kabinett kan användas för tvätt av medicinska instrument, sterila container, vagnar, transportvagnar, mm.



Tvättcentral

LC80 kabinett kan användas för tvätt av vagnar, transportvagnar, sängar, mm.



Tvättcentral

Kabinett med lösningar för automatisk inlastning / utlastning.