



Vacuklave 550 Melag Bordsautoklav

XL kammare
Volym 50 L
Upp till 25 kg instrument

Klass B autoklav i bordsmodell för kirurgiska instrument, utensilier med mera.

DRYtelligence = **Automatisk torktids anpassning** beroende på mängden lastat gods (sparar tid och energi).
XL kammare **spara tid, energi och underhåll**.

Spara tid, energi och underhåll



Processtid 12 minuter (ej torkning)
med 25 Kg instrument




Spara energi med viloläges knappen

Stor intuitiv pekskärm med färgdisplay.



Bordsautoklav Vacuklave 550. Olika konfigurationer för att få mer flexibilitet.

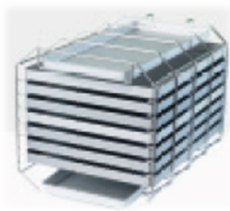

Standard korg upp till 16 brickor



Utdragbar insats för upp till 10 container MELAstora



Utdragbar insats med korg för upp till 16 brickor

Tillval som kan hjälpa dig i sterilprocessen

Klick här för att gå

OFFERTFÖRFRÅGAN



Vattenreningsenhet MELAdem 47



Etikettskrivare MELAprint 60



Märkpistol MELAdoc



Vacuklave 550 Nyckelfunktioner

- ➔ Drytelligence system: Denna teknik är baserad på en sensorstyrd torkningsfunktion. En speciellt utvecklad algoritm gör att torkningen kan anpassas automatiskt till sterilisatorns individuella belastning. DRYtelligence® garanterar inte bara optimala torkresultat utan förkortar också torktiderna med upp till 80%.
- ➔ Denna patenterade dubbelmantel teknik stöder snabbt avlägsnande av luft från steriliseringskammaren, steriliseringspaket, container och även från instrumenthåll. Denna teknik säkerställer en särskilt effektiv sterilisationsprocess med högsta mättade ångkvalite.
- ➔ Stor pekskärm möjliggör intuitiv hantering på högsta nivå. Displayen innehåller också integrerad programvara för dokumentation, godkännande och spårning.
- ➔ Med viloläges knappen sätts autoklav i viloläge och återaktiveras lika snabbt. På detta sätt kan energiförbrukningen, som redan är låg, minskas ytterligare.
- ➔ Alla användare kan utrustas med en individuell PIN-kod för säker spårning av batch godkännandet. Godkännandet autentiseras snabbt och säkert på skärmen.
- ➔ CF kort för spara processdokumentationer
- ➔ Förvalet för starttid gör det möjligt att välja vilket program som helst och att starta vid valfri tid, till exempel för rutinprovsprogram.
- ➔ Det patenterade systemet för värmeåtervinning distribuerar värmen från den använda ångan för att generera ny ånga. Återvinningstekniken minskar inte bara energiförbrukningen med 15 % per cykel, utan även värmeavledning till saneringsrummet..

Tillval

- ➔ Märkpistol MELAdoc
- ➔ Etikettskrivare MELAprint 60
- ➔ Spårbarhetssystem MELAtrace
- ➔ Vattenbehandling MELAdem 47
- ➔ Korgar, instrumentgaller och container för diskdesinfektor och autoklaver

Mått och anslutningar (Rätten till ändringar förbehålles)

Elektrisk anslutning	220VAC-50Hz
Effekt (version 15A)	3400W
Säkringar (version 15A)	16A
Effekt (version 13A)	2700W
Säkringar (version 13A)	13A
Vattenanslutning (kallvatten)	3/4"
Avloppsanslutning	15mm
Kammare	38 cm diameter X 45 cm lång
Kammare Volym	53 Liter
Yttermått bxhxd (cm)	63,6 X 59 X 71,5
Vikt / arbetsvikt upp till	98 Kg / 127Kg

Relaterade produkter



Korgar, instrumentgaller och container



Rullsvets för packning av medicintekniska produkter



Diskdesinfektor golvmödel
Olika modeller