



Kompakt spoldesinfektor Steelco BP100 HSE




Frontmatad, lämpligt för äldre-, hälso-, sjuk- och andra vårdinrättningar.

Steelco BP 100 HSE Spoldesinfektor ger perfekt hygien och skydd för både patienter och vårdpersonal.



Dörr, välj mellan:

- BP100 HE = Manuell dörröppning och manuell dörrstängning
- BP100 HSE = Automatisk dörröppning och manuell dörrstängning
- BP100 HAE = Automatisk dörröppning och automatisk dörrstängning

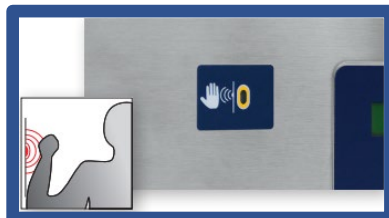

Infrarött system. Utvecklat för en ökad hygien, väl beröringsfri dörrstyrning på frontpanelen.

Tillval tillgängligt bara med helautomatisk dörr funktion

Lastexempel



AD MediCals
kemisortiment Diskmedel
och torkmedel
Klicka här för att gå till
kemi

Stort sortiment av korgar.
Här är några exempel



Klicka här för att gå till

OFFERTFÖRFRÅGAN





BP100 HSE Nyckelfunktioner

- ➔ Hög säkerhet och lättanvänt kontrollsystem på panelen, med LED display för att visualisera cykelstatus.
- ➔ 4 standard förprogrammerade cykler tillgängliga och 4 ytterligare cykler tillgängliga för anpassning.
- ➔ Stark cirkulationspump säkerställer högt vattenflöde kombinerat med effektivt spraytryck.
- ➔ En kemidoseringspump försedd med nivåbevakning.
- ➔ Utrymme för att förvara upp till två kemikaliedunkar på 5 liter.
- ➔ Möjlighet att välja mellan väggavlopp eller golvvavlopp.
- ➔ Vägghängd eller golvstående

Tillval

- ➔ RS 232-port för skrivaranslutning för övervakning av diskprocess och validering av program.
- ➔ Extern skrivare
- ➔ Infrarött system (bara med helautomatisk dörr)
- ➔ Torkningssystem med HEPA H14 luftfilter
- ➔ 1 extra doseringspump

Som komplement



Utslagsback med randspolning



Diskbänksskåp



Förvaringsställ



Väggskåp

Mått och anslutningar (Rätten till ändringar förbehålles)

Elektrisk anslutning	400VAC-3F-50Hz
Effekt	5050W
Säkringar	3 X 10A
Vattenanslutning (kallvatten och varmvatten)	3/4"
Avloppsanslutning	110mm
Buller	<70 dB(A)

