



Skyddsventilation Dragskåp – LabSafe

LabSafe är ett högpresterande svenskt Dragskåp. Utvecklat för skyddsventilerade arbeten i laboratorier och på sjukhus. Dragskåpet har en sluttande front för god ergonomi och kan utformas enligt kundens önskemål.

Dragskåpet LabSafe har en ren och funktionell design. Utformat för att ge bästa luftströmnings- och hygienförhållanden som leder till en säkrare arbetsmiljö. Alla ingående material i dragskåpet är särskilt utvalda för att tåla kemikalier och långvarigt slitage på allra bästa sätt.



Vid val av Dragskåp är det viktigt att välja rätt. Våra dragskåp är utformade för att möta marknadens och myndigheternas krav och samtidigt erbjuda både optimalt skydd och komfort för användaren.

Alla våra dragskåp kommer färdigmonterade, endast att koppla in media och VA.

Dragskåpmodeller LabSafe Standardutförande

Utformning	LabSafe10	LabSafe12	LabSafe15	LabSafe18
Utvändig bredd	1000mm	1200mm	1500mm	1800mm
Utvändigt djup	795mm	795mm	795mm	795mm
Höjd exkl. stativ	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
Höjd inkl. stativ	2280mm	2280mm	2280mm	2280mm
Höjd max öppen lucka	2680mm	2680mm	2680mm	2680mm
Arbetsyta djup*bredd	702x870	702x1070	702x1370	702x1670
Arbetsyta	Syrafast rostfritt stål	Syrafast rostfritt stål	Syrafast rostfritt stål	Syrafast rostfritt stål
Utslags tratt	Ja, polypropen	Ja, polypropen	Ja, polypropen	Ja, polypropen
Sidopanel	Ja, höger sida	Ja, höger sida	Ja, höger sida	Ja, höger sida
Eluttag	4st	4st	4st	4st
Brytare till eluttag	Ja	Ja	Ja	Ja
Eluttag	IP20	IP20	IP20	IP20
Armatyr	KV	KV	KV	KV
Belysning	LED >1000LUX	LED >1000LUX	LED >1000LUX	LED >1000LUX
Fronluckla	Lamellglas	Lamellglas	Lamellglas	Lamellglas
Spännings - matning	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Säkring matning	10 A	10 A	10 A	10 A
Frånluftsansluts-anslutning	200 Ø	250 Ø	250 Ø	315 Ø
Forcerat flöde rekommenderat	140 l/s	180 l/s	230 l/s	280 l/s
Grundflöde	30 l/s	40 l/s	50 l/s	60 l/s

Alla våra dragskåp levereras med en hög standard men ibland önskar man ha tillval

Tillval				
Utformning	LabSafe10	LabSafe12	LabSafe15	LabSafe18
Arbetsyta i Durcon	Ja	Ja	Ja	Ja
Arbetsyta i emaljerad stål	Ja	Ja	Ja	Ja
Arbetsyta i polypropen	Ja	Ja	Ja	Ja
Diskho	Ja	Ja	Ja	Ja
Spillvulst	Ja	Ja	Ja	Ja
Stativ	900mm	900mm	900mm	900mm
Stativ sittande	720mm	720mm	720mm	720mm
Motordrivet stativ	700-1200mm	700-1200mm	700-1200mm	700-1200mm
Vägghängt motorstativ	720-1200mm	720-1200mm	720-1200mm	720-1200mm
Vägghängt stativ fast läge	720/900mm	720/900mm	720/900mm	720/900mm
Extra eluttag	Ja	Ja	Ja	Ja
Elförregling	Ja	Ja	Ja	Ja
Akustiskt/Optiskt flödeslarm	Ja	Ja	Ja	Ja
VAV-system	Ja	Ja	Ja	Ja
Gasarmatur tekniska gaser	Ja	Ja	Ja	Ja
Gasarmatur stadsgas	Ja	Ja	Ja	Ja
Blandare KV/VV	Ja	Ja	Ja	Ja
Blandare med dusch	Ja	Ja	Ja	Ja

Kontakta oss om du saknar något tillval som du behöver, vi hjälper gärna till med specialutföranden.

Vi är specialister

Vi konstruerar och tillverkar dragskåp enligt dina önskemål




En modulariserad konstruktion ger möjlighet till snabb och enkel service samt möjlighet för framtida uppgraderingar för att upprätthålla en modern och uppdaterad arbetsplats.

Vad vill du komplettera ditt dragskåp.

Vi kompletterar ditt dragskåp med de tillbehör som din verksamhet behöver.



Höj och-sänkbart stativ

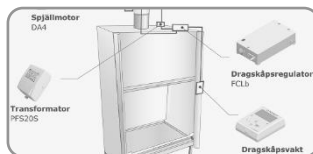

VAV system för variabelt flöde och larmfunktion



Luckstängnings-automatik. Energisparande och ökad säkerhet

Övriga Dragskåp i LabSafe Serien

LabSafe12-S- Syra Dragskåp

LabSafe12-S

Syradragskåp är anpassade för arbeten med oxiderande ämnen i ett dragskåp. Dragskåpet är utformat i polypropen eller kompaktlaminat och har en arbetsyta i Durcon eller polypropen. Syradragskåpet finns både med och utan spolning. Integrerade värmehållare i arbetsytan finns som tillval.



LabSafe12-Renrum- RenrumsDragskåp



LabSafe12-Renrum

Dragskåp är specialanpassade för renrum. Utformat i kompaktlaminat och renrums designat för steril miljö.

Specialanpassad frånluft.

LabSafe15W-I – Walk-in Dragskåp

LabSafe15W-I

Walk-in dragskåpet som ger flexibilitet i arbetet. LabSafe15W-I är utformat för krav på större tillgänglighet och yta i dragskåpet. Så som apparatur och rullbord.



LabSafe12-Isotop



LabSafe12-Isotop

Specialdragskåp för applikationer där strålskydd behövs. Isotopdragskåp ger möjlighet att arbeta med radioaktivt material.

AD- Medical hjälper dig med allt projektering, cadritning och leverans av ditt laboratorium.



Övrigt sortiment

Filterdragskåp

Draghuvar

Dragbänkar

Ventilerade Diskbänkar

Punktutsug

LAF-Bänkar

BSC Säkerhetsbänkar

Glow-box

Kemikalieförvaring

Autoklaver

Diskdesinfektorer

Laboratorieinredning

Sjukusinredning

Renrumsinredning

Kriminaltekniska laboratorier

Patologi och- cytologi

Sterilcentraler

Rostfri/ syrafast rostfri inredning

Skolinredning

Materialförvaring


Kyl och – Frysförvaring

Klimatskåp

Genomräkningskåp

Det tryggaste valet.

Kontakta våra specialister vi utgår från funktion och säkerhet. Konstruerar och tillverkar utifrån höga krav och med högsta kvalitet.

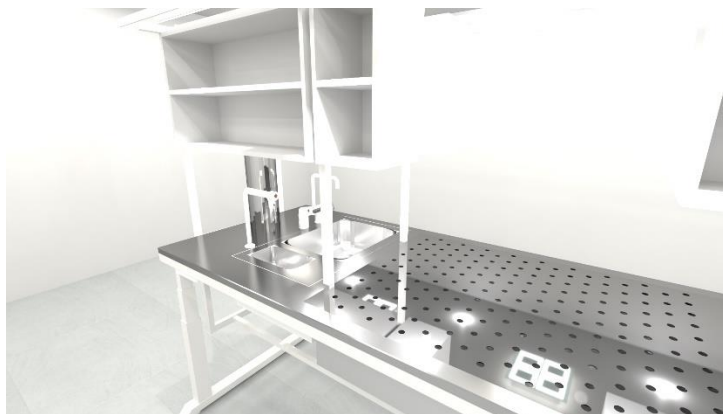

www.ad-medical.se

Kontakta oss

Växelnummer: 031-49 59 99

Frågor/Beställning: info@ad-medical.se