



Skyddsventilation Dragskåp – EduSafe

Dragskåp för personskydd som passar lika bra i skolan som på ett sjukhus.
I miljöer där ett mindre dragkåp är bättre, men där kravet på funktion och kvalitet är
fortsatt högt är bästa valet EduSafe som finns i 5 olika varianter.

EduSafe är ett skyddsventilerat dragskåp speciellt utformat för skolor och sjukhus. Dragskåpet är enkelt att arbeta i och framtaget för att klara de tuffa krav som ställs i skolmiljö och på sjukhus. EduSafe finns både som elevdragskåp för laborationer i NO-Salar och som demonstrationsdragskåp för lärare. Skåpet är p g a sin storlek även populärt på sjukhus och på vårdcentraler.



Vid val av Dragskåp till skolor är det viktigt att välja rätt. I vår produktserie EduSafe har du hela 5 varianter att välja mellan och 16 olika tillval. Allt för att skapa möjlighet att hitta det rätta dragskåpet för din verksamhet.

Finns inte möjlighet att koppla till frånluftsventilation, välj då vårt skåp EduSafe-F med filterreningsteknik.

Dragskåpmodeller EduSafe Standardutförande

Utformning	EduSafe10	EduSafe10+	EduSafe10-HKA	EduSafe-Demo
Utvändig bredd	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
Utvändigt djup	645mm	645mm	645mm	645mm
Höjd exkl. stativ	1350mm	1350mm	1350mm	1350mm
Höjd inkl. stativ	2130mm	2130mm	2130mm	2130mm
Höjd max öppen lucka	2480mm	2480mm	2480mm	2480mm
Arbetsyta djup*bredd	530x963mm	530x963mm	530x963mm	530x963mm
Arbetsyta	Syrafast rostfritt stål	Syrafast rostfritt stål	Syrafast rostfritt stål	Syrafast rostfritt stål
Utslagsträtt	Ja, polypropen	Ja, polypropen	Ja, polypropen	Ja, polypropen
Panellist	Ja, höger sida	Ja, höger sida	Ja, höger sida	Ja, höger sida
Eluttag	2st	2st	2st	2st
Brytare till eluttag	Ja	Ja	Ja	Ja
Eluttag	IP20	IP20	IP20	IP20
Armatyr med vred	KV	KV	KV	KV
Belysning	LED >1000LUX	LED >1000LUX	LED >1000LUX	LED >1000LUX
Frontlucka	Lamellglas	Lamellglas	Lamellglas	Lamellglas
Spännings - matning	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Säkring matning	10 A	10 A	10 A	10 A
Frånluftsansluts-anslutning	200 Ø	200 Ø	200 Ø	200 Ø
Forcerat flöde rekommenderat *	120 l/s	120 l/s	120 l/s	120 l/s
Grundflöde	30 l/s	30 l/s	30 l/s	30 l/s

*Vid öppen lucka 280mm

Alla våra dragskåp levereras med en hög standard men ibland önskar man ha tillval

Tillval					
Utformning	EduSafe10	EduSafe10+	LabSafe10-HKA	EduSafe-Demo	
Arbetsyta i Durcon	Ja	Ja	Ja	Ja	
Arbetsyta i emaljerat stål	Ja	Ja	Ja	Ja	
Arbetsyta i polypropen	Ja	Ja	Ja	Ja	
Diskho	Ja	Ja	Ja	Ja	
Stativ	900mm	900mm	900mm	900mm	
Stativ sittande	720mm	720mm	720mm	720mm	
Motordrivet stativ	700-1200mm	700-1200mm	700-1200mm	700-1200mm	
Vägghängt motorstativ	720-1200mm	720-1200mm	720-1200mm	720-1200mm	
Vägghängt stativ fast läge	720/900mm	720/900mm	720/900mm	720/900mm	
Extra eluttag	Ja	Ja	Ja	Ja	
Akustiskt/Optiskt flödeslarm	Ja	Ja	Ja	Ja	
VAV-system	Ja	Ja	Ja	Ja	
Glasade/Glasad gavel	Ja	Ja			
Gasarmatur tekniska gaser	Ja	Ja	Ja	Ja	
Gasarmatur stadsgas	Ja	Ja	Ja	Ja	
Blandare KV/VV	Ja	Ja	Ja	Ja	

Kontakta oss om du saknar något tillval som du behöver, vi hjälper gärna till med specialutföranden

Dragskåp i EduSafe Serien

EduSafe10

Klassiskt skoldragaskåp anpassat utifrån behovet som finns när man utför laborationer i en NO-Sal. Arbetsyta i syrafast rostfritt stål, labtratt, kallvatten, skjutlucka som hindrar stänk och skyddar vid explosion. Dragaskåpet kopplas till frånluft som tar hand om luftburna föroreningar. Dragaskåpet står på ett stativ



EduSafe10+

Är liksom EduSafe10 är Edusafe10+ utrustat för skolmiljö. Dragaskåpen har samma utformning men + har ett extra förvaringsutrymme i form av bänkskåp med sockel under Dragaskåpet.

EduSafe10-HKA

Har samma utformning som vårt klassiska dragaskåp Edusafe10. Men är speciellt anpassad för personer i rullstol eller med funktionshinder. Dragaskåpet har höj- och sänkbart stativ för att kunna anpassa höjden efter behov. Dragaskåpet har även vred för armaturer placerade i dragaskåpets front för bättre tillgänglighet för laboranten.






EduSafe10- Demo

Specialdragskåp för labbdemonstrationer i skolmiljö. Dragskåpet har bra insyn via glasade gavelsidor samt rygg. EduSafe10 ger med sin skjutlucka och klassiska funktion ett bra skydd för elever och lärare.

EduSafe-F är ett demonstrationsdragskåp anpassat för skolor. Denna typ av dragskåp använder kol- eller HEPA filtrering för att skydda elever och lärare mot luftburna föroreningar. Dragskåpet är mobilt och kan enkelt flyttas från en skolsal till en annan. Perfekt om flera lärare ska samsas om ett demonstrationsdragskåp.

Läs mer om AduSafe-F i vår produktbroshyr över filterdragskåp

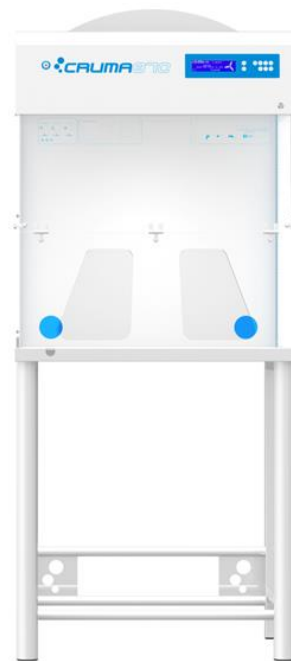

AD- Medical hjälper dig med allt projektering, cadritning och leverans av lab eller skolsal.



Övrigt sortiment

Filterdragskåp

Draghuvar

Dragbänkar

Ventilerade Diskbänkar

Punktutsug

LAF-Bänkar

BSC Säkerhetsbänkar

Glow-box

Kemikalieförvaring

Autoklaver

Diskdesinfektorer

Inredning NO-klassrum

Inredning för hemkunskap

Materialsåp

Laboratorieinredning

Sjukhusinredning

Renrumsinredning

Kriminaltekniska laboratorier

Patologi och cytologi

Sterilcentraler

Rostfri/ syrafast rostfri inredning

Skolinredning

Materialförvaring

Kyl- och Frysförvaring

Klimatsåp

Genomräkningsåp



Det tryggaste valet.

Kontakta våra specialister, vi utgår från funktion och säkerhet. Vi konstruerar och tillverkar utifrån höga krav och med högsta kvalitet.

Vi har även övrig inredning till skolor, se vår broschyr Educator. Inredningen Educator kan även användas inom vården på vårdcentraler, vårdboenden och sjukhus



Produkten levereras av
AD-Medical AB
www.ad-medical.se

Kontakta oss
Växelnummer: 031-49 59 99
Frågor/Beställning: info@ad-medical.se