



## LC20 Steelco kabinettdiskdesinfektor

1500mm kammare längd

**Kabinettdiskdesinfektor LC20 är det självklara valet för exempelvis sterilcentraler, hjälpmedelscentraler eller tvättcentraler.**

En helautomatisk diskdesinfektor med manuell dörr. Finns tillgänglig med en eller två dörrar.




Integrerad kemikalieförvaring med lättåtkomlig gångjärnsdörr på nedre delen av serviceområdet.



AD MediCals kemisortiment, diskmedel och torkmedel. Klick här för att gå till kemi.

Rostfri dörr (tillval)

Kan installeras i i grop (110mm djup) eller utan grop (med ramp)

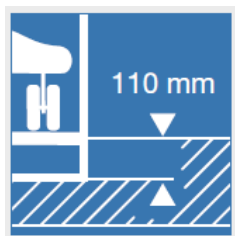

**Stort sortiment av vagnar.** Här är några exempel



C658



C690



C653

Klick här för att gå


**OFFERTFÖRFRÅGAN**



Oscillerande rör med munstycken i rostfritt stål




Justerbar vagnstyrskena

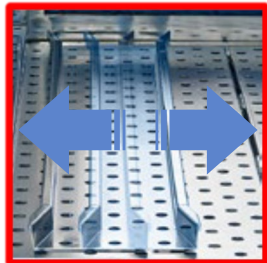

Självrengöringsfilter som spolar och fångar upp rester under tvättning (tillval).




Dockningsanslutning (tillval)

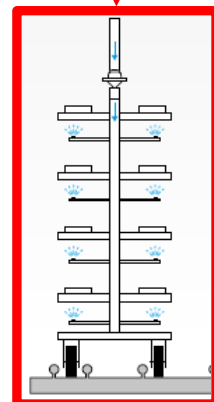

Enkel åtkomst till kammarbotten.



Tiltningsfunktion i sidled plus varmluftstorkningen gör att torkningsfasen blir snabbare.

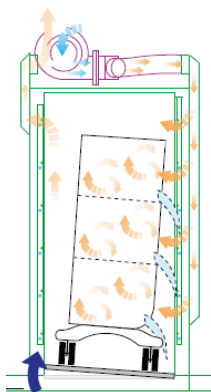



## LC20 Nyckelfunktioner

- ➔ Hög säkerhet och lättanvänd touch-kontrollsystem på panelen med färgskärm för att visualisera cykelstatus.
- ➔ Glasdörr av dubbel HST härdat glas.
- ➔ Torkningssystem med justerbar tid och temperaturinställning. Hjälper till att säkerställa fullständig torkning.
- ➔ Diskning- och desinfektions-temperaturen är helt justerbar upp till 93° C. Temperaturen övervakas av två oberoende temperaturgivare.
- ➔ Stark rostfri cirkulationspump, vertikalt installerad, säkerställer högt vattenflöde kombinerat med effektivt spraytryck.
- ➔ Kammaren, diskarmar och vattenfilter av högkvalitativt AISI 316L rostfritt stål. Ytterpaneler och chassi tillverkat av AISI 304 rostfritt stål.
- ➔ Två kemidoseringspumpar försedda med flödesmätare och nivåbevakning.
- ➔ Tryckvakt för övervakning av diskprocess.
- ➔ En eller två dörrar.
- ➔ Integrerad kemikalieförvaring med lättåtkomlig gångjärnsdörr på nedre delen av serviceområdet (plats för 2 st 10 liters dunkar).

## Tillval

- ➔ Upp till 2 extra kemiska doseringspumpar
- ➔ HEPA H14 luftfilter
- ➔ Konduktivitetssensor
- ➔ Integrerad skrivare
- ➔ Ethernet-anslutning (T-DOC kompatibel)
- ➔ Analog sensor på diskkrets för tryckkontroll
- ➔ Kammarbelysning
- ➔ Avloppspump
- ➔ Ångkondensator
- ➔ Dockningsanslutning
- ➔ Automatik inlastning / utlastning
- ➔ Avloppskyllning
- ➔ Streckkodsläsare
- ➔ Självrengöringsfilter för återcirkulation av tvättvattnet.
- ➔ Rostfri dörr

## Mått (Rätten till ändringar förbehålles)

LC20 (mm)	Yttre dimensioner (mm)			Kammare dimensioner (mm)		
KAMMARE	BRED	DJUP	HÖJD	BRED	DJUP	HÖJD
1500	1800	1658	2460	900	1500	1850