



## Helix Test

*PCD (Process Challenge Device)*

### Produktinformation. Artikelnummer 01080

Indikatorn system med helix provkropp avsedd att användas vid prestandaprovning av små ångautoklaver av typ B. Helix test kan användas som Bowie & Dick typ test och / eller som process kontroll.




### Egenskaper

Lägg Helix test på en bricka eller bland steriliseringsgodset i kammaren. Starta ett 134 grader sterilisationsprogram eller Bowie & Dick program.



### Indikatorremsan

LOT nr, utgångsdatum och lagringsföreskrifter står på ytterförpackningen. Indikatorremsan har klisterremsa på baksidan för dokumentation. Varje förpackning innehåller en ny provkropp.

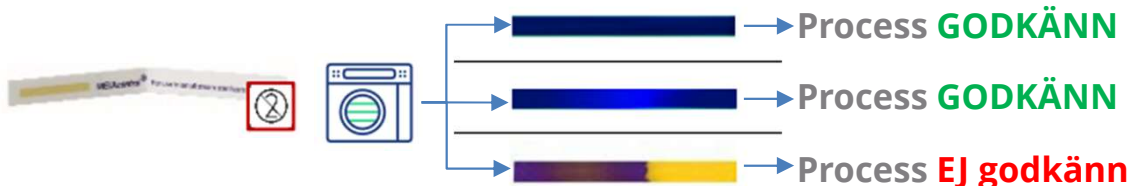

### Specifikationer

Konform med EN ISO 17665; EN 867/5  
Tillförlitlig

### Förpackningen innehåll



Artikelnummer 01080  
1st Helix provkropp  
250st Indikatorer

Skanna QR  
kod för att  
se våra  
produkter



Kemikalier



Diskdesinfektor



Svetsar



Autoklaver

